



Floswitch®

Estéril, uso único


- Floswitch® actúa como dispositivo ON/OFF en las vías de infusión, ya que detiene el flujo para llevar a cabo procedimientos en la vía en un circuito cerrado.
- Diseñado para reducir el riesgo de émbolos en el paciente y de contaminación de la sangre por el personal hospitalario.
- Floswitch® está concebido para aumentar la seguridad.
- Floswitch® se puede acoplar a cualquier catéter que disponga de conector Luer.
- Con alas para facilitar la conexión.

Floswitch® cerrado

La compresión externa de la alargadera mediante una bola de acero ofrece una apertura y un cierre inequívocos y sin riesgos de la vía de infusión.



Floswitch® abierto

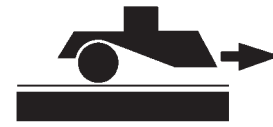

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)
681033	Floswitch®	25/250

Libre de látex

Marcado CE

Clase IIa conforme a la Directiva europea sobre productos sanitarios 93/42/CEE, enmendada por la Directiva 2007/47/CE. Vida útil: 5 años

Método de esterilización: óxido de etileno