


Manifolds con transductor integrado TRAM®

El manifold con transductor integrado TRAM® permite que un solo usuario pueda realizar, cómodamente, el purgado, la calibración o puesta a cero y la recalibración en el campo estéril. Este manifold optimiza la comodidad del médico reduciendo la fatiga de las manos gracias a su bajo torque y a unos mangos fáciles de girar y muy espaciados incluso al utilizar presiones de inyección elevadas. El colector Devos™ TRAM® cuenta con una válvula de retención y escape. 10 unidades por estuche, 4 estuches por caja.

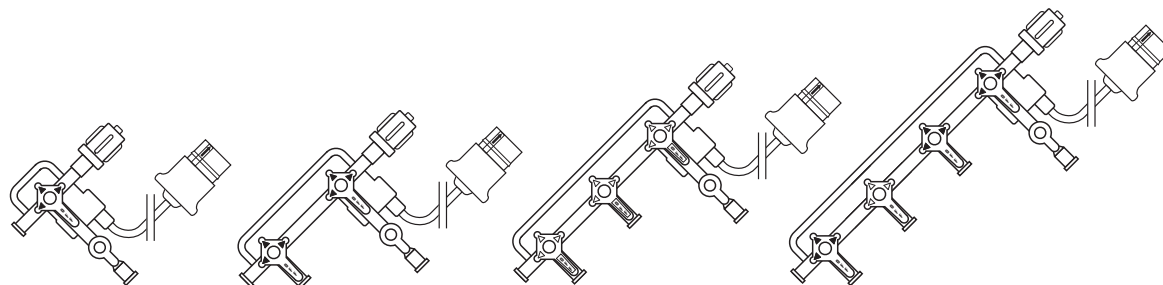

1 puerto

2 puertos

3 puertos

4 puertos

200 psi (14 bar)


Mangos ON Anchos				
Estándar	201LTPHN-R		203LTPHN-R	
Mangos OFF Anchos		202LTPHWF-R	203LTPHWF-R	204LTPHWF-R
Devos™				2V4LTPHWF-R
Devos™ con mango de 360°				2V4LTPHWF-RT
Estándar			203LTPHF-R	

500 psi (34 bar)

Mangos ON Anchos		502LTPHWN-R	503LTPHWN-R	504LTPHWN-R
Estándar	501LTPHN-R		503LTPHN-R	
Mangos OFF Anchos		502LTPHWF-R	503LTPHWF-R	504LTPHWF-R
Estándar			503LTPHF-R	

Manifolds con transductor integrado Tram-P™

El manifold TRAM-P™ dispone de un transductor de presión en el primer puerto. Colocando la línea de compensación en un portasueros en lugar de sobre una mesa, el colector TRAM-P™ mantiene una lectura constante y calibrada. Con esta configuración, el manifold se puede mover a cualquier posición sin que la precisión de la lectura de presión se vea afectada. Opción de agarre para los dedos muy amplia y cómoda. El colector Devos™ TRAM-P™ cuenta con una válvula de retención y escape. 10 unidades por estuche, 4 estuches por caja.

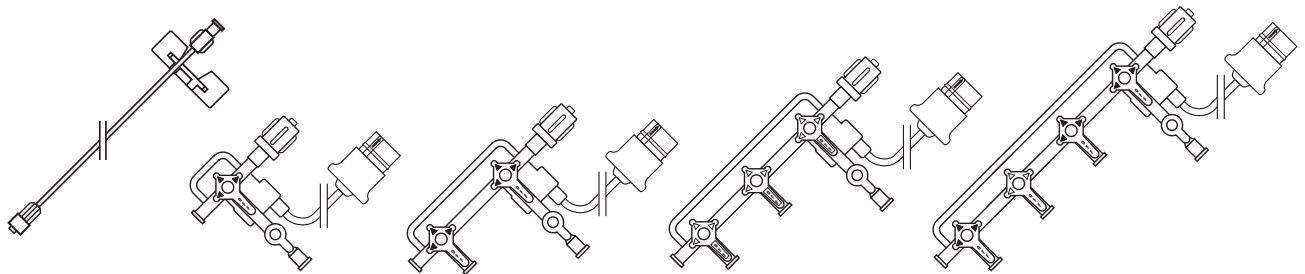

1 puerto

2 puertos

3 puertos


4 puertos

200 psi (14 bar)

Mangos ON Anchos		202LTCHWN-R	203LTCHWN-R	204LTCHWN-R
Estándar	201LTCHN-R		203LTCHN-R	
Mangos OFF Anchos		202LTCHWF-R	203LTCHWF-R	204LTCHWF-R
Devos				22V4LTCHWF-R
Devos con mango de 360°				2V4LTCHWF-RT
Estándar			203LTCHF-R	

500 psi (34 bar)

Mangos ON Anchos		502LTCHWN-R	503LTCHWN-R	504LTCHWN-R
Estándar	501LTCHN-R		503LTCHN-R	
Mangos OFF Anchos		502LTCHWF-R	503LTCHWF-R	504LTCHWF-R
Estándar	501LTCHF-R		503LTCHF-R	

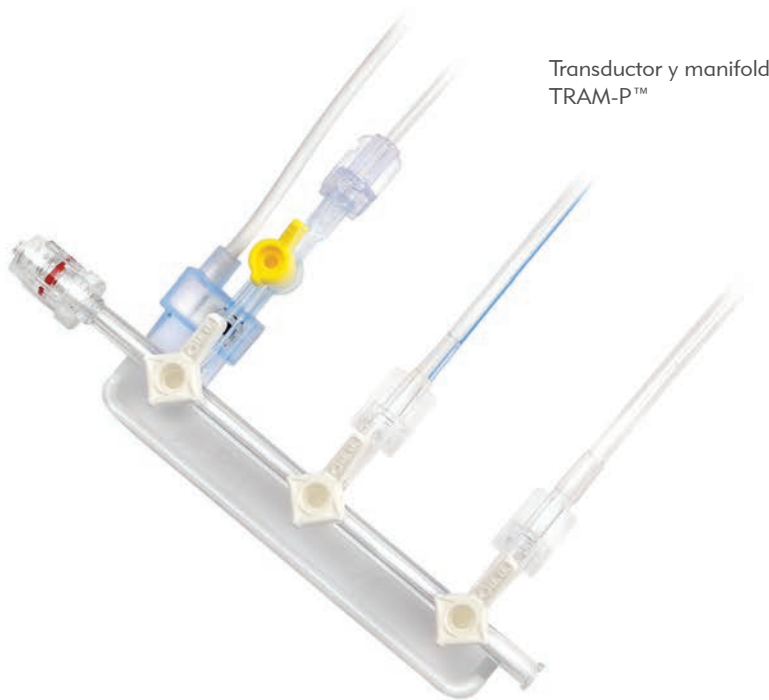

Transductor y manifold TRAM-P™