


# AL6X Filtro Sanguíneo Arterial

*Bajo volumen de cebado de filtro arterial con X Coating™*

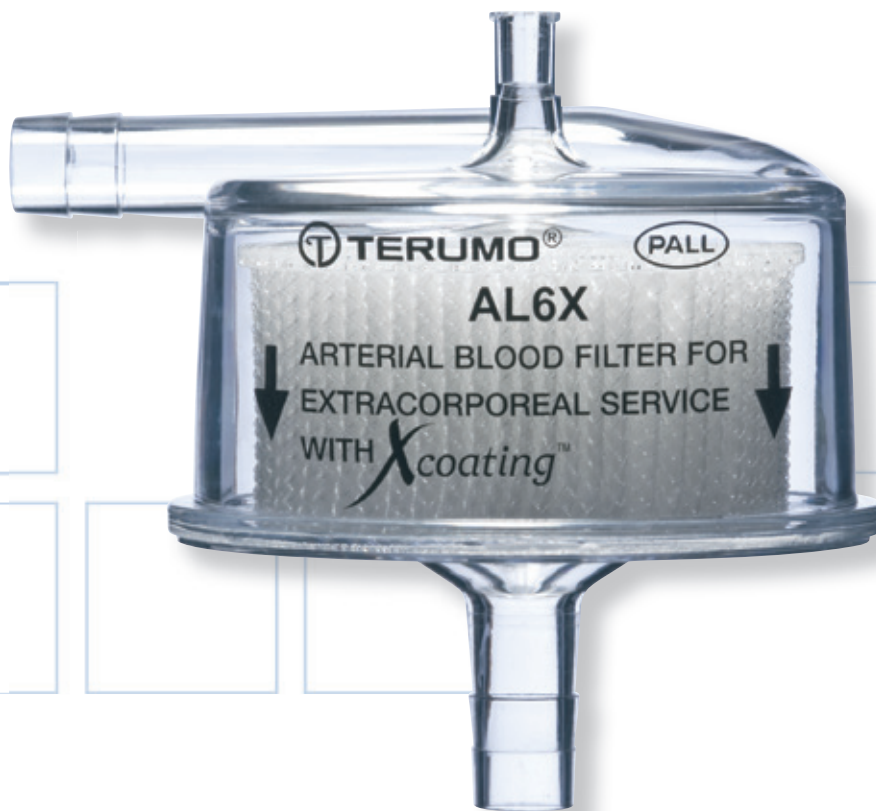

# AL6X Filtro Sanguíneo Arterial con XCoating®

## Características

- Bajo volumen de cebado
- Baja presión de caída
- Filtro de poliéster entrelazado de 40 µm
- Flujo tangencial no turbulento
- Carcasa transparente
- Sin envolturas, resinas o adhesivos

## Beneficios


- Reduce el volumen de cebado
- Reduce la exposición a superficies extrañas
- Fácil de cebar y desburbujar
- Mínimo trauma sanguíneo

## Óptimo Diseño


- Dinámica de Flujo Computacional (CFD) e Imágenes de Resonancia Magnética han sido empleados para crear un flujo tangencial no turbulento reduciendo el estrés reológico y los potenciales daños a la sangre.
- Diseño de ayuda computarizado, reduce volumen de cebado y optimiza el cebado y desburbujado.
- Construido con material transparente para asegurarse el completo desburbujamiento.
- Tratado con XCoating® un recubrimiento que es un polímero anfifílico, biopasivo que reduce la desnaturalización proteica y adhesión plaquetaria.

## Especificaciones

Material de la Carcasa	Policarbonato
Material del Filtro	Poliéster de Tejido entrelazado
Tamaño del Filtro	40 micrones
Superficie del Filtro	550 cm <sup>2</sup>
Puertos Sanguíneos	3/8"
Volumen de Cebado	100mL
Rango máximo de flujo sanguíneo	8L/min
Presión de caída	Menos de 15mmHg a 6 L/min

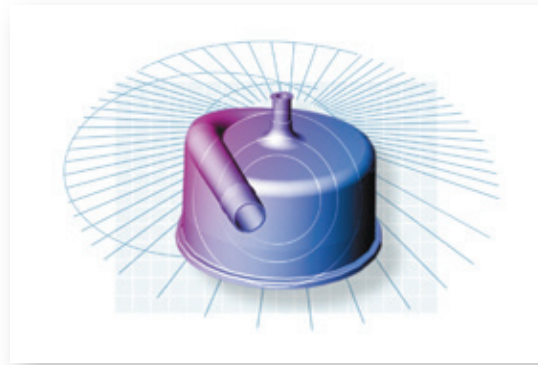

El Filtro Pall AL6X ha sido diseñado usando tecnologías CAD, CFD y MRI que mejora significativamente el rendimiento en la filtración arterial al servicio de la circulación extracorpórea.

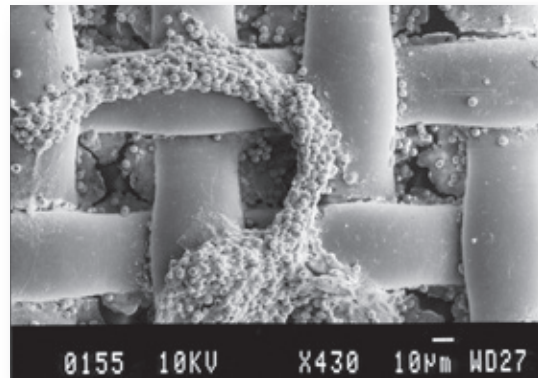

A microscopía electrónica se muestra partículas de desecho en el filtro de 40 µm.

## Información para Ordenar

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA
AL6X	AL6X Filtro sanguíneo arterial	10
FH1	Soporte para Filtro	1



### Contactar a:

#### TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.

Praça General Gentil Falcão,  
No. 108 - 9º andar, Cidade  
Monções - Brooklin Novo  
Zip code: 04571-150  
São Paulo - SP, Brasil  
TEL.+55-11-3594-3800  
FAX.+55-11-3594-3829  
<http://www.terumo.com.br>

#### TERUMO CHILE LTDA.

Carmencita 25, Oficina 22,  
Edificio Central Park,  
Las Condes,  
C.P. 755-0000  
Santiago, Chile  
TEL.+562-2480-9600  
FAX.+562-2480-9608  
[www.terumochile.cl](http://www.terumochile.cl)

#### TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Edificio Bogota Business  
Center,  
Calle 103, No.14A-53,  
Oficina 307,  
Bogota, D.C.,  
Colombia  
TEL/FAX.+57-1256-8400

#### TERUMO LATIN AMERICA CORPORATION

8750 NW 36th Street, Suite 600  
Miami, Florida 33178  
USA  
+1 305 477 4822 phone  
+1 305 477 4872 fax  
+1 800 283 7866 toll free (USA)

#### TERUMO MEDICAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur 1647,  
Piso 11, Col. San José Insurgentes,  
Del. Benito Juárez, C.P. 03900,  
México, D.F., México  
TEL.+52-55-1085-0770  
FAX.+52-55-1085-0771  
[www.terumo.com.mx](http://www.terumo.com.mx)