



CAPIOX[®] Filtro Arterial para uso Pediátrico



Cebado fácil
Desburbujado eficiente
Bajo volumen de cebado
Hasta 2,5 L/min para un amplio
rango de pacientes

Claramente la elección de filtro pediátrico

Claramente, el filtro de su elección

Rápido cebado

- Eficiencia sin par y la facilidad de cebado hace a este product líder en la elección para filtración arterial.
- No solo este nuevo diseño es de rápido cebado sino también minimiza efectivamente las micro burbujas de aire debido a una estratégica configuración de la malla plisada dentro de la carcasa.


Bajo volumen de cebado

- Porque el volumen de cebado es un factor crucial en perfusion pediátrica el filtro arterial Capiox para uso pediátrico, ha sido diseñado para requerir solo 40 mL de volumen, haciendolo especialmente beneficioso en el cuidado neonatal e infantil.




Desburbujado Superior

- El uso del Filtro Arterial Terumo Capiox, tiene un flujo de patron espiral el cual mejora la remocion de aire dentro del filtro utilizando la diferencia entre las fuerzas centrifugas del aire y la sangre. Ademas, la alta eficiencia del material del filtro remueve microagregados mientras que facilita la remocion de burbujas.

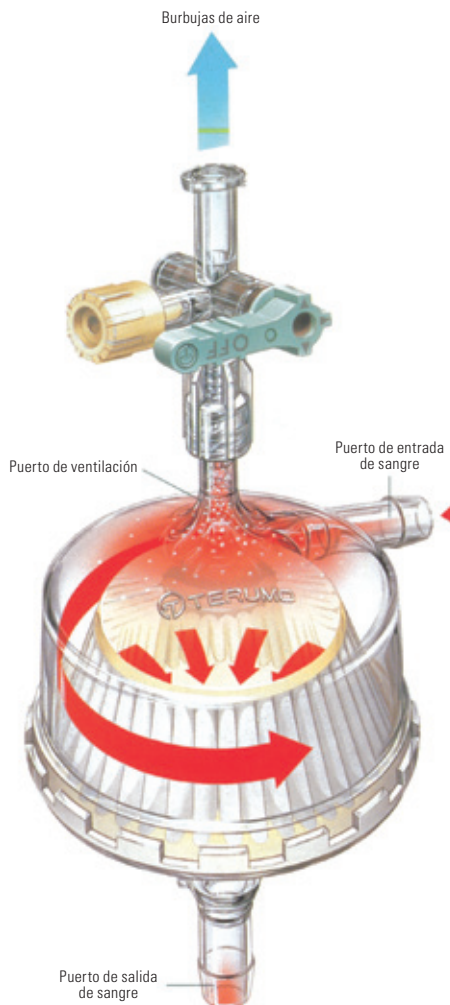

Eficiencia de Filtracion

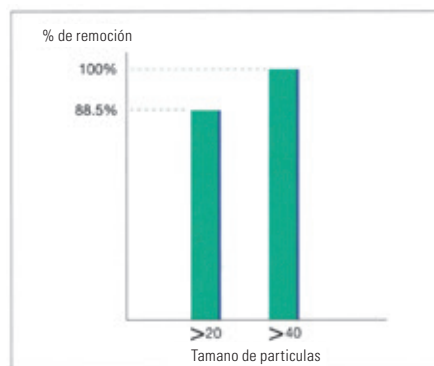

Carcasa transparente

- El Filtro Arterial Capiox para uso pediátrico, esta construido en una carcasa completamente transparente, permitiendo la visualización desde cualquier ángulo. Esta adición de característica de seguridad permite la monitorización de cualquier burbuja de aire, la cual pudo entrar al filtro durante el cebado.



Especificaciones

Código del Producto	CX*AF02
Material de la carcasa	Policarbonato
Material del filtro	Poliéster
Tamaño del poro del filtro	32um
Puerto de sangre	¼" (6,4mm)
Volumen de cebado	40mL
Presión de Caída (flujo sanguíneo)	25mmHg (2,5 L/min.)
Rango de flujo sanguíneo máximo	2,5 L/min
Código del Soporte	XX*XH041

Contactar a:

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.

Praça General Gentil Falcão,
No. 108 - 9º andar, Cidade
Monções - Brooklin Novo
Zip code: 04571-150
São Paulo - SP, Brasil
TEL.+55-11-3594-3800
FAX.+55-11-3594-3829
http://www.terumo.com.br

TERUMO CHILE LTDA.

Carmencita 25, Oficina 22,
Edificio Central Park,
Las Condes,
C.P. 755-0000
Santiago, Chile
TEL.+562-2480-9600
FAX.+562-2480-9608
www.terumochile.cl

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.

Edificio Bogota Business
Center,
Calle 103, No.14A-53,
Oficina 307,
Bogota, D.C.,
Colombia
TEL/FAX.+57-1256-8400

TERUMO LATIN AMERICA CORPORATION

8750 NW 36th Street, Suite 600
Miami, Florida 33178
USA
+1 305 477 4822 phone
+1 305 477 4872 fax
+1 800 283 7866 toll free (USA)

TERUMO MEDICAL DE MEXICO S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur 1647,
Piso 11, Col. San José Insurgentes,
Del. Benito Juárez, C.P. 03900,
México, D.F., México
TEL.+52-55-1085-0770
FAX.+52-55-1085-0771
www.terumo.com.mx